



SELVIT

NOVÝ ŠTANDARD PRE NOSIDLÁ

HYBRIBOND

**PREPRAVA A PRESUN ZRANENÝCH PACIENTOV
V ŠPORTOVÝCH AREÁLOCH
A PREDNEMOCNIČNÉ SCENÁRE**

- *Integrovaný pásový systém*
- *Rýchle a bezpečné použitie*
- *Vysoká nosnosť*
- *Exkluzívny dizajn*
- *Veľké rozmery*
- *Ľahké otočenie na bok*
- *Záchranná zdravotná služba*
- *Armáda*
- *Športové areály*
- *Záchrana pri katastrofách*
- *Horská záchranná služba*
- *Záchrana v divočine*




**FUTBAL
RAGBY • BASKETBAL**

**PRETEKY
ATLETIKA • KRIKET**

EXKLUZÍVNY PATENTOVÝ DIZAJN


Steny **HYBRIBOARD** neohrozujú pacienta rizikom sekundárneho poškodenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké vertikálne steny košových nosidiel (výška 20-25 cm). Špeciálna „zadržiacia“ konštrukcia so stenami v uhle 30° je ideálnym kompromisom medzi rýchlym naložením pacienta a bezpečnou imobilizáciou. Nižšie steny umožňujú jednoduchšie podanie liekov a starostlivosť o pacienta.

V prípade pretáčania sa s nosidlami **HYBRIBOARD** veľmi ľahko manévruje a tiež sa vyhnete kroku, pretože vďaka mierne zakriveným bočným stenám sa nevyžaduje premiestnenie pacienta, ktorý sa naopak na klasických chrbtových nosidlách musí po pretočení premiestniť nabok, keďže nie je umiestnený v strede nosidiel.

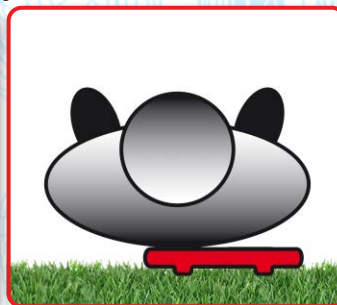


CHRBTOVÉ DOSKY

*Príliš malé pre športovcov.
Zložitý systém popruhov typu pavúk.
Pomalý postup pri naložení pacienta.*

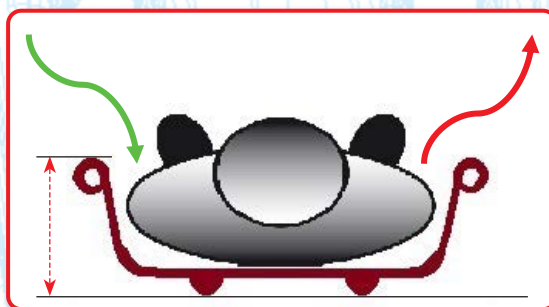

KOŠOVÉ NOSIDLÁ

*Steny sú príliš vysoké.
Vysoké riziko sekundárnych poškodení.
Ľahké dostať pacienta dovnútra,
ťažké ho vybrať von.
Náročná aplikácia elektród AED.*

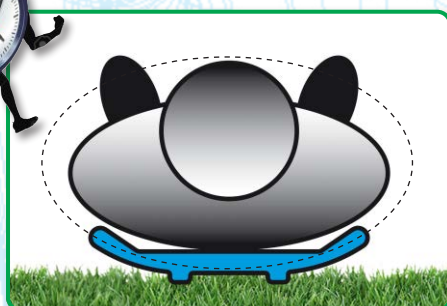


HYBRIBOARD

*Jednoduché a rýchle naloženie pacienta.
Bezpečný integrovaný pásový systém.
Veľké rozmery pre veľkých športovcov.
Nosnosť 500 kg.*



Prečo používať dve nosidlá?

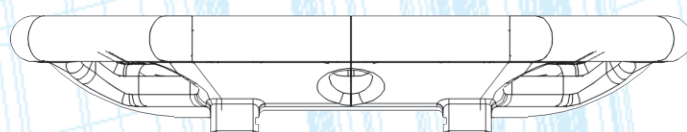

Správny kompromis na držanie pacienta je tu!

KONIEC PROBLÉMU S PÁSMI TYPU PAVÚK

Veľmi často je aplikácia pásov pomalá a zložitá kvôli systému uzáveru na suchý zips alebo komplexným postupom. V dôsledku toho sa pásy často nepoužívajú, čo ohrozuje bezpečnosť pacienta. Často visia z nosidiel, čím vystavujú aj záchranára nebezpečenstvu.




Integrovaný pásový systém
Exkluzívny integrovaný systém pásov umožňuje rýchle a bezpečné použitie. Tieto navíjače rýchlo zasúvajú pásy do dosky, keď sa nepoužívajú. Tým sa šetrí priestor a čas na uloženie pacienta. Naloženie a evakuácia pacienta je tak rýchlejšia a bezpečnejšia.




ČAS PRE ŠTANDARDNÝ POSTUP

Pri záchrane športovcov neexistuje štandardný postup. Na prepravu pacientov sa často používajú rôzne zariadenia a techniky. Je to zmes rôznych nosidiel s jedinečnými tvarmi a funkciami v prostredí bez pravidiel. Mnohé z týchto praktík môžu byť nebezpečné.

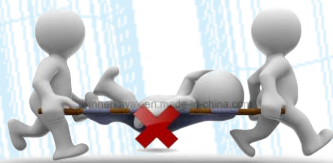

HYBRIBOARD

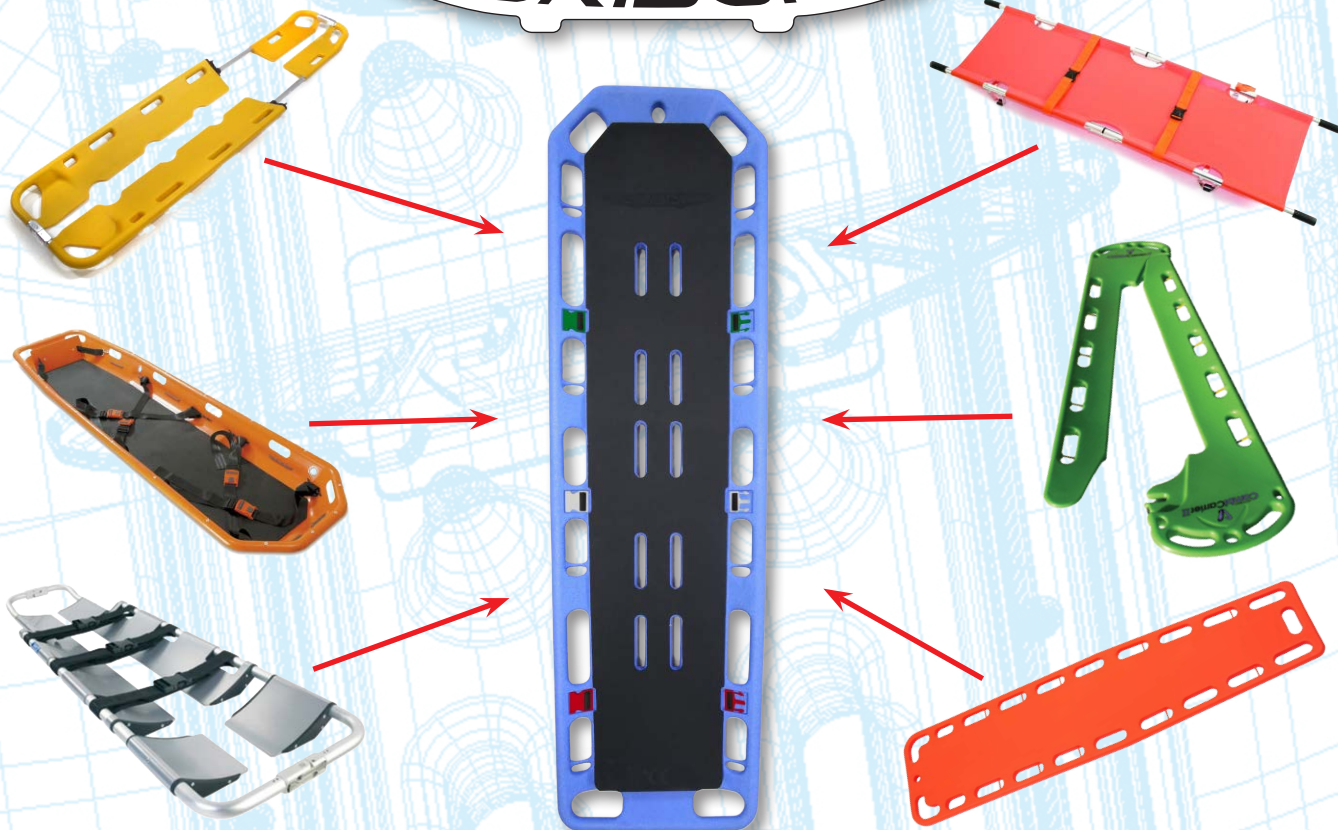

V súčasnosti, nosidlá **HYBRIBOARD** kombinujú rôzne funkcie najlepších nosidiel na trhu. Sú navrhnuté na prepravu zranených pacientov v širokej škále situácií. Majú veľké rozmery pre väčších športovcov, ale vyhovujú aj pediatrickým pacientom. Pevné steny pomáhajú imobilizovať a stabilizovať pacienta počas presunu. Dizajn obsahuje bočné steny so sklonom 30°, ktoré umožňujú ľahké a bezpečné udržanie pacienta. Integrované bezpečnostné pásy zabezpečia pacienta a umožňujú rýchlu imobilizáciu. K dispozícii je aj mäkká penová matrac pre pohodlie pacienta.



Perfektne pasuje na náš NOSIČ EL-2000

HYBRIBOARD sa dá bez problémov naložiť na náš nosič, čo umožňuje rýchlu a pohodlnú prepravu nosidiel a pacientov.



Hybriboard EMS
bez pásov a matracu
kód: HY/EMS



Hybriboard Sport
kód: HY/SP


DOSTUPNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Imobilizér hlavy
kód: HY/FC

Prílnavý matrac
kód: HY/MAT001

Set 3 vonkajších pásov
kód: HY/CIN3

Pásy typu pavúk
kód: HY/RC

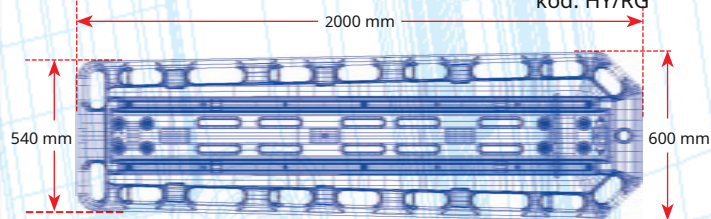

SELVIT, spol. s r.o.

Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina, email: medical@selvit.sk, www.selvit.sk
tel: +421 41 56 89 416, mobil: 0903 891 006